


# Guía de tubos de sangre

Toda la información está relacionada con la marca de tubos de extracción de sangre, Kangjian.  
Por lo tanto, no podemos garantizar que la información se aplique a otras marcas de tubos.

## Tubos de suero

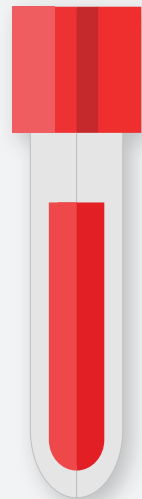

### Sin aditivos

Tubos para la recolección y almacenamiento de sangre para bioquímica, inmunología, etc.


**Aditivo:** Ninguno

**Inversiones del tubo:** 0

**Tiempo para la retracción completa del coágulo:** 1,5-2 horas.

**Centrifugación:** 3500-4000 r/m

**Tiempo de centrifugación:** 5 min.

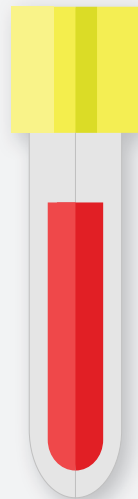

### Gel separador

Tubos para pruebas que requieren suero separado, incluyendo bioquímica, inmunología, etc.


**Aditivo:** Coagulante y gel separador

**Inversiones del tubo:** 5

**Tiempo para la retracción completa del coágulo:** 20-25 min.

**Centrifugación:** 3500-4000 r/m

**Tiempo de centrifugación:** 5 min.

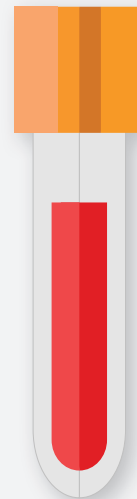

### Activador de coagulo

Tubos para pruebas que podría verse afectado negativamente por el gel separador del tubo amarillo.

**Aditivo:** Coagulante


**Inversiones del tubo:** 5

**Tiempo para la retracción completa del coágulo:** 20-25 min.

**Centrifugación:** 3500-4000 r/m

**Tiempo de centrifugación:** 5 min.

## Tubos de plasma

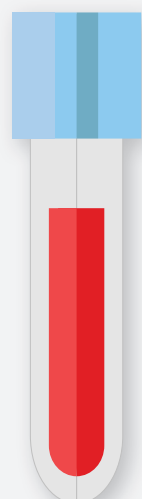


### PT

Tubos para las pruebas de coagulación de la sangre del sistema de coagulación (PT, TT, APTT y fibrinógeno).

**Aditivo:** Citrato de sodio

**Inversiones del tubo:** 3-4

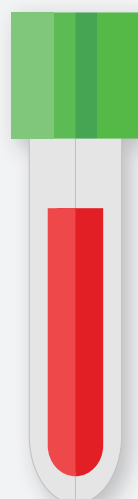

### Heparina


Tubos para pruebas de plasma clínico, similar en uso a los tubos activadores de coágulos en suero, pero adecuado para pruebas en plasma en lugar de suero.

**Aditivo:** Heparina de litio

**Inversiones del tubo:** 8

**Centrifugación:** 3500-4000 r/m

**Tiempo de centrifugación:** 3 min.

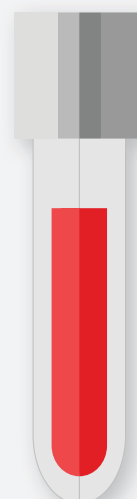

### Glucosa

Tubos para la recolección de sangre para pruebas como azúcar en la sangre, tolerancia al azúcar y lactato.


**Aditivo:** Fluoruro de sodio y heparina de sodio

**Inversiones del tubo:** 8

**Centrifugación:** 3500-4000 r/m

**Tiempo de centrifugación:** 5 min.

## Tubos de sangre total

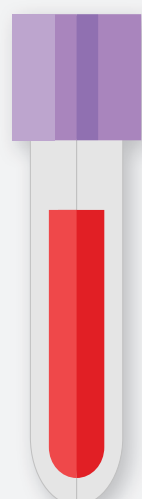


### EDTA

Tubos estándar utilizado en hematología clínica, pruebas cruzadas, grupos sanguíneos y diversos instrumentos de análisis de células sanguíneas.

**Aditivo:** EDTA

**Inversiones del tubo:** 8

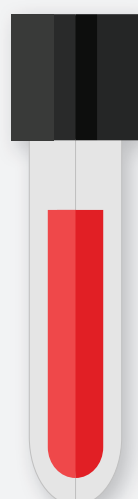

### ESR

Tubos para medir la velocidad de sedimentación globular (ESR o VSG en español). El ESR es la velocidad a la que los glóbulos rojos en sangre entera anticoagulada descienden en un tubo estandarizado durante un período de una hora.

Es una prueba de hematología común, y es una medida no específica de inflamación. Para realizar la prueba, la sangre anticoagulada se coloca tradicionalmente en un tubo vertical, conocido como tubo de Westergren, y la distancia a la que caen los glóbulos rojos se mide y se informa en mm al final de una hora.

## Orden de extracción

Para extraer sangre en diferentes tubos, Kangjian recomienda seguir este orden para evitar la contaminación cruzada de la muestra por aditivos encontrados en diferentes tubos de recolección.

